



DS Implants®

DS PrimeTaper® Implant System

Посібник з проведення хірургічних
процедур та каталог продукції



Продукти, спеціально розроблені для використання з імплантатами PrimeTaper EV, представлені в цьому каталозі продукції. За додатковими продуктами, будь ласка, зверніться до каталогу продукції для системи імплантатів Astra Tech Implant System EV. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.dentsplysirona.com

Всі інструкції по використанню від Dentsply Sirona доступні на сайті www.dentsplysirona.com/ifu.

Не всі продукти можуть бути схвалені/випущені/ліцензовані на всіх ринках. Будь ласка, звертайтеся до місцевого представництва Dentsply Sirona для отримання актуальної інформації про асортимент продукції та її наявність.

Для покращення читабельності для наших клієнтів компанія Dentsply Sirona не використовує символи ® чи ™ в основному тексті. Однак компанія Dentsply Sirona не відмовляється від своїх прав на торговельні марки, і нічого в цьому документі не може бути витлумачено інакше.

Ілюстрації продукції не відповідають масштабу.

ЗМІСТ

1. Упаковка імплантатів	4
Кольорове маркування	4
2. Імплантати	5
3. Гвинти-заглушки	6
4. Формувачі ясен	6
5. Інструменти	8
Початкові свердла	8
Свердла	8
Мітчики	9
Проміжні свердла	9
6. Лотки	10
7. Інші хірургічні інструменти	14
8. Інструменти - навігаційна хірургія	16
Punches	16
Свердла	16
Кортикальні свердла	17
Проміжні свердла	18
Taps	18
Sleeves	19
Driver	19
Стабілізаційні Абатменти	20
Guide Fixation Surgical Tray	20
Washtray	20
	24
9. Специфікація матеріалів	25
10. Показник	26

1. Упаковка імплантатів

Імплантати PrimeTaper EV постачають у подвійній стерильній блістерній упаковці, поміщеній у коробку.



Зовнішня коробка

- Кольорове маркування діаметру імплантату відповідно до інформації про з'єднання EV та довжини імплантату на бокових етикетках.
- QR-коди з обох боків.
- Під час зберігання вся важлива інформація залишається видимою.
- Інструкції по застосуванню доступні в електронному вигляді (eIFU) на вебсайті ifu.dentsplysirona.com

Блістер

- Внутрішня стерильна упаковка
- Містить контейнер з імплантатом
- Відривна наклейка з номером партії для забезпечення зручної документації ходу лікування.

Кольорове маркування

Система імплантатів DS PrimeTaper доступна в різних діаметрах та довжинах. Колірне маркування дозволяє легко визначити правильне з'єднання та вибрати відповідні ортопедичні компоненти.

Імплантат Ø мм	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
З'єднання	XS	S	M	L	L
Довжина, мм	-	-	6.5	6.5	6.5
	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9
	11	11	11	11	11
	13	13	13	13	13
	15	15	15	15	15
	-	17	17	17	-

2. Імпланти

XS PrimeTaper EV Ø3.0



Довжина, мм	8	9	11	13	15
Артикул	68011085	68011086	68011087	68011088	68011089

S PrimeTaper EV Ø3.6



Довжина, мм	8	9	11	13	15	17
Артикул	68011090	68011091	68011092	68011093	68011094	68011095

M PrimeTaper EV Ø4.2



Довжина, мм	6.5	8	9	11	13	15	17
Артикул	68011096	68011097	68011098	68011099	68011100	68011101	68011102

L PrimeTaper EV Ø4.8



Довжина, мм	6.5	8	9	11	13	15	17
Артикул	68011103	68011104	68011105	68011106	68011107	68011108	68011109

L PrimeTaper EV Ø5.4




Довжина, мм	6.5	8	9	11	13	15
Артикул	68011110	68011111	68011112	68011113	68011114	68011115

PrimeTaper EV

Титан¹, стерильно

- Імпланти доступні в різноманітному діапазоні діаметрів і довжин для всіх показань, включаючи ситуації з обмеженим простором та/або кількістю кісткової тканини

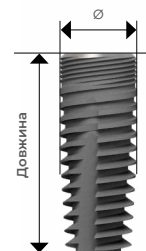

XS

S

M

L

- Кожному розміру з'єднання імплантат-абатменту відповідає окремий колір, який послідовно застосовується до всіх відповідних елементів системи.
- Обробка всієї поверхні імплантата OsseoSpeed, включаючи мікрорізьбу до фаски(скосу)
- Сумісність з асортиментом ортопедичних компонентів імплантатів DS з з'єднанням EV

3. Гвинти-заглушки

Гвинт-заглушка EV (Cover Screw EV)

Титановий сплав², стерильно

Гвинт-заглушка EV (Cover Screw EV)


				
	XS	S	M	L
Артикул	68010001	68010002	68010005	68010006

4. Формувачі ясен

Формувач ясен EV (Healing Abutment EV)

Титановий сплав², стерильно

- Для контурування м'яких тканин на етапі загоєння
- Кольорове маркування та маркування висоти
- Нанесені лазером смуги для позначення висоти

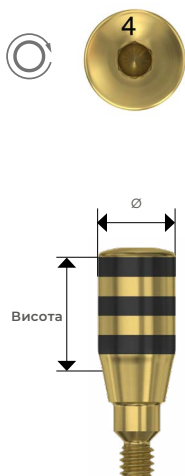

XS Формувач ясен EV (Healing Abutment EV)

				
Ø мм	4	4	4	4
Висота, мм	2	3	4	6
Артикул	68013044	68013045	68013046	68013047

S Формувач ясен EV (Healing Abutment EV)

				
Ø мм	4	4	4	4
Висота, мм	2	3	4	6
Артикул	68013048	68013049	68013050	68013051

M Формувач ясен EV (Healing Abutment EV)

				
Ø мм	4	4	4	4
Висота, мм	2	3	4	6
Артикул	68013052	68013053	68013054	68013055


L Формувач ясен EV (Healing Abutment EV)

				
Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3
Висота, мм	2	3	4	6
Артикул	68013056	68013057	68013058	68013059

Формувач ясен HealDesign™ EV (HealDesign™ EV)

Титановий сплав*, стерильно

- Для контурування м'яких тканин на етапі загоєння
- Може застосовуватися як для одноетапних, так і для двоетапних хірургічних процедур
- Мають маркування діаметра та довжини

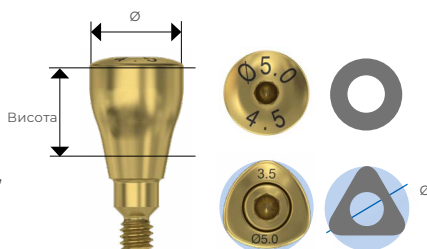

Круглі форми можуть застосовуватися в будь-яких положеннях у ротовій порожнині

Трикутні форми призначені для імплантатів у передньому відділі та імітації форми різців і іклів.
Трикутний абатмент HealDesign EV (Triangular HealDesign EV) складається з двох частин

XS Формувач ясен HealDesign EV

Ø мм	3.5	3.5	3.5	3.5
Висота, мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013001	68013002	68013003	68013004

S Формувач ясен HealDesign EV

Ø мм	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	5
Висота, мм	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5	3.5
Артикул	68013005	68013006	68013007	68013008	68013009	68013010	68013011	68013012	68013013	68013014	68013039

M Формувач ясен HealDesign EV

Ø мм	5	5	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	5	6.5
Висота, мм	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	3.5
Артикул	68013015	68013016	68013017	68013018	68013019	68013020	68013021	68013022	68013040	68013041

L Формувач ясен HealDesign EV

Ø мм	5	5	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	5	6.5
Висота, мм	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5	3.5	3.5
Артикул	68013023	68013024	68013025	68013026	68013027	68013028	68013029	68013030	68013031	68013032	68013042	68013043

5. Інструменти

Початкові свердла

Нержавіюча сталь¹⁾, стерильно

- Для багаторазового використання з можливістю одноразового використання, за винятком свердла коп'євидного (Precision Drill), яке є одноразовим
- Використовується для позначення початкової точки

Свердло коп'євидне (Precision Drill) є надзвичайно гострим, тому його слід використовувати з обережністю, щоб уникнути травм

Свердло направляюче
Guide Drill



Свердло коп'євидне
Precision Drill



Ø мм	не застосовується	не застосовується
Артикул	68015133	68015134

Свердла

PrimeTaper Drill

Нержавіюча сталь³⁾, TiN-спокриття⁴⁾, стерильно

- Вигравірувані лазером мітки глибини
- Багаторазове застосування з можливістю одноразового використання
- Маркування номерів свердл 1–7


Короткі



Ø мм	1.9	2.35	2.95	3.55	4.15	4.75	5.35
Артикул	68015324	68015325	68015326	68015327	68015328	68015329	68015330

Голина свердління

- Глибина свердління вимірюється від найбільш широкої частини наконечника свердла вгору до мітки глибини
- Глибина свердління вимірюється від найбільш широкої частини наконечника свердла до мітки глибини

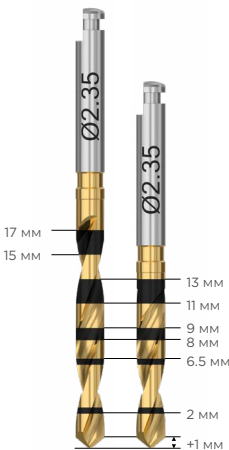

Довгі



Ø мм	1.9	2.35	2.95	3.55	4.15	4.75
Артикул	68015331	68015332	68015333	68015334	68015335	68015336

Мітчики PrimeTaper (PrimeTaper Tap)



Ø мм	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Артикул	68015347	68015348	68015349	68015350	68015351

Мітчики

Мітчики PrimeTaper (PrimeTaper Tap)

Нержавіюча сталь³, стерильно

- Маркована глибина 6,5 мм
- Багаторазове застосування з можливістю одноразового використання
- Маркування відповідних діаметрів

Короткі



Ø мм	2.65	3.25	3.85	4.45	5.05
Артикул	68015337	68015338	68015339	68015340	68015341

Проміжні свердла

PrimeTaper Drill

Нержавіюча сталь³, TiN-покриття⁴, стерильно

- Проміжні гвинтові свердла для свердління остеотомічного отвору точного діаметра
- Вигравірувані лазером мітки глибини
- Багаторазове застосування з можливістю одноразового використання
- Маркування відповідних діаметрів

Довгі



Ø мм	2.65	3.25	3.85	4.45	5.05
Артикул	68015342	68015343	68015344	68015345	68015346

6. Лотки

Лоток хірургічний PrimeTaper Surgical Tray

PPSU пластик, силіконові тримачі, нестерильно

Лоток хірургічний PrimeTaper Surgical Tray використовується під час хірургічних процедур та для зберігання


- Інструменти розташовані в порядку їх використання
- Два шари для інструментів
- Рішення без втулок для полегшення очищення
- Кольори та іконки, що відповідають хірургічній процедурі
- QR-код на упаковці для сканування та отримання додаткової інформації
- Без інструментів

Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів для замовлення хірургічного набору PrimeTaper (хірургічний лоток та необхідні інструменти)




Розмір, мм	Довжина 138	Ширина 190	Висота 61.5
Артикул	68015321		

Верхній лоток

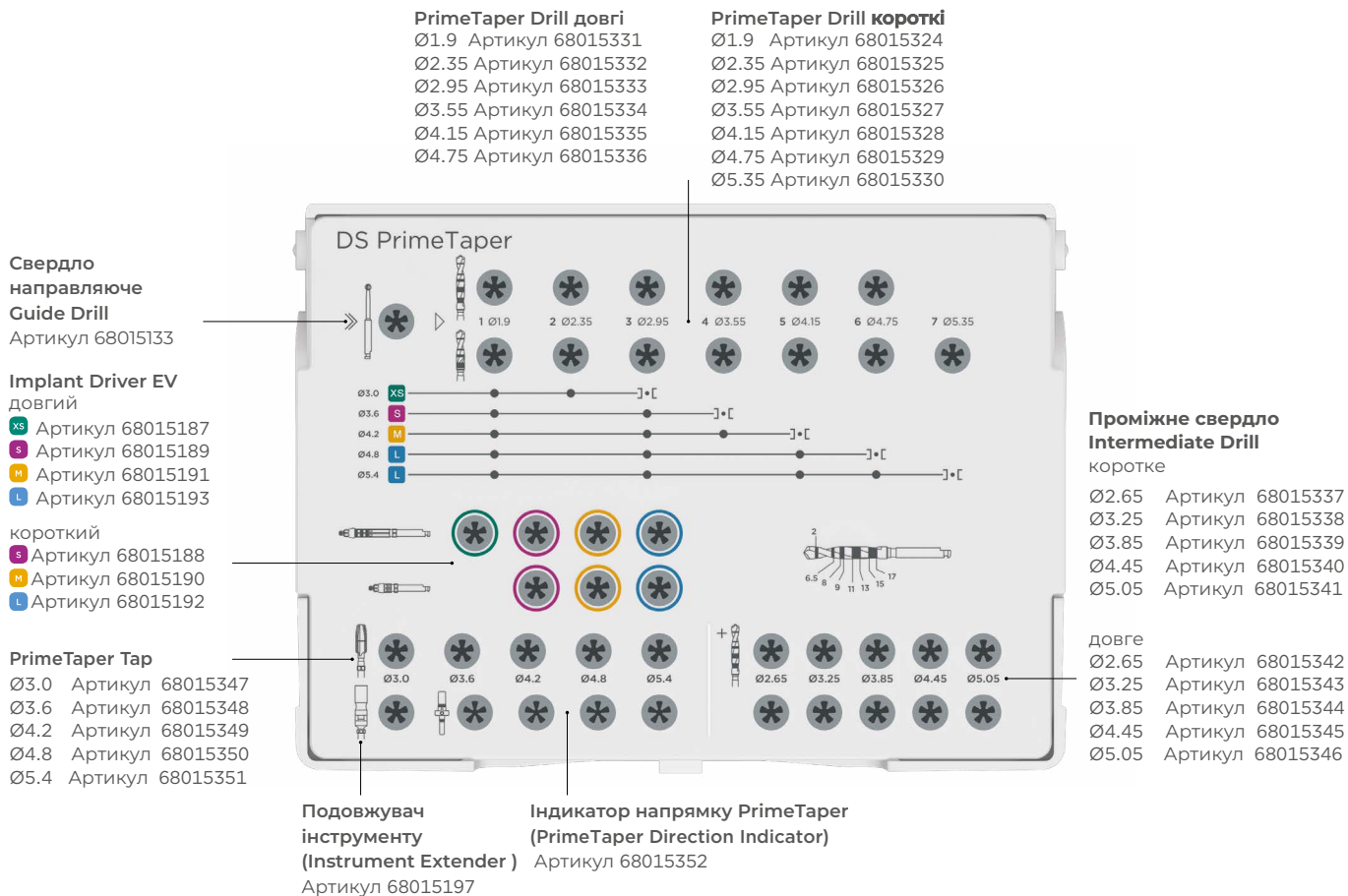

Нижній лоток

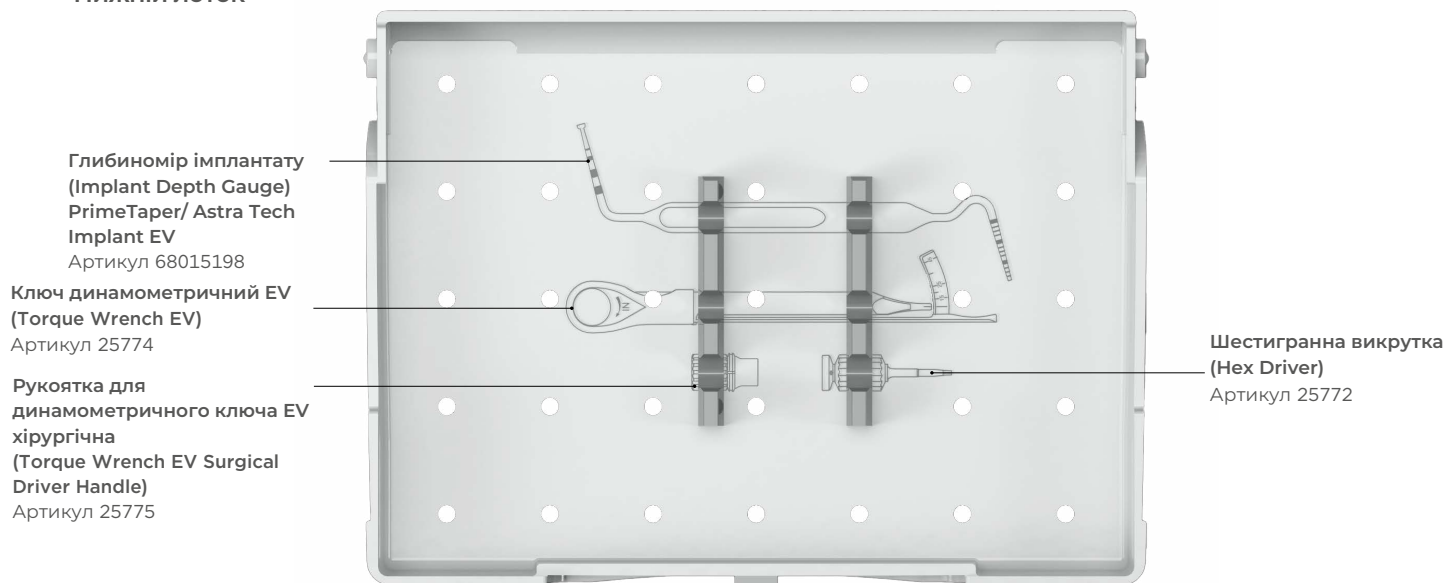

Кістковий ріпер EV (Bone Reamer EV)

Нержавіюча сталь¹, нестерильно

- Кісткові ріпери та направляючі для кісткових ріперів доступні у розмірах від 3,0 до 5,4 в асортименті OsseoSpeed EV і сумісні з абатментами майже усіх діаметрів і дизайнів.
- Лінії індикації глибини, вигравірувані лазером.
- Марковані за діаметром.
- Використовуються для видалення надлишку кісткового гребеня для забезпечення правильної посадки абатменту.


Кістковий ріпер EV (Bone Reamer EV)

						
Ø мм	4.0	4.6	5.2	5.8	6.4	7.0
Загальна довжина, мм	26	26	26	26	26	26
Артикул	26206	26207	26208	26209	26210	26211

Направляюча для кісткового ріперу EV (Bone Reamer Guide EV)

Нержавіюча сталь¹, нестерильно

- Використовується для напрямку кісткового ріперу EV (Bone Reamer EV)

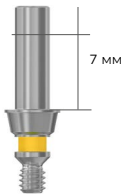

Направляюча для кісткового ріперу EV (Bone Reamer Guide EV)

					
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Артикул	26212	26213	26214	26215	26216

Шаблон SmartFix® (SmartFix® Guide)

Нержавіюча сталь¹, нестерильно


- Трикомпонентний.
- Використовується для напрямку свердління з правильною ангуляцією.

Шаблон SmartFix® SmartFix® Guide

	
Артикул	68015235



Розмір, мм	Довжина 276	Ширина 176	Висота 59
Артикул	68015323		

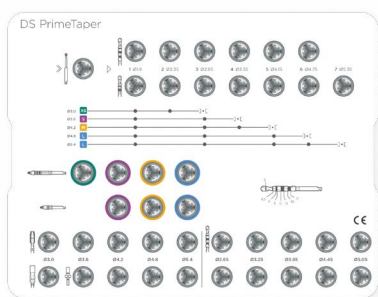

Артикул	68015353
---------	----------

Контейнер для стерилізації лотка для промивання (Washtray Sterilization Container)



Артикул	68015266
---------	----------

Багаторазовий фільтр для контейнеру для стерилізації лотка для промивання (Reusable Filter for Washtray Sterilization Container)



Артикул	68015267
---------	----------

Лоток для промивання PrimeTaper (PrimeTaper Washtray)

Нержавіюча сталь¹, PEEK², силікон³, алюмінієвий сплав⁴

- Вміщує всі свердла та інструменти, необхідні для хірургії з DS PrimeTaper
- Вміщує тримачі інструментів, знімну накладку та направляючі

Запасні елементи	Артикул
Тримач для стрижня стандарту ISO, (PEEK) з металевою пружиною (Instrument Holder for ISO shank, PEEK-plastic with metal spring) (5 шт.)	3107 1004
Тримач інструментів середній (Instrument Holder medium) (5шт.)	3107 1005
Тримач насадки для ключа-тріскачки, силікон (Instrument Holder for Ratchet Insert) (5 шт.)	3107 1006

Накладка для лотку для промивання PrimeTaper (PrimeTaper Washtray Overlay)

Алюмінієвий сплав⁵

- Використовується разом з лотком для промивання PrimeTaper (PrimeTaper Washtray)

Знімну накладку слід забрати з лотка для промивання перед очищенням і поставити назад перед стерилізацією. Для додаткової інформації, будь ласка, зверніться до інструкції з очищення та стерилізації.

Контейнер для стерилізації лотка для промивання (Washtray Sterilization Container)

Алюмінієвий сплав⁶, Нержавіюча сталь³, PEEK⁶, Силікон⁸, нестерильний

Контейнер для стерилізації лотків для промивання використовується для стерилізації та їх зберігання.

Фільтр необхідно придбати окремо.

Багаторазовий фільтр для контейнеру для стерилізації лотка для промивання (Reusable Filter for Washtray Sterilization Container)

PTFE¹¹, нестерильно

Використовується як запасна частина для контейнеру для стерилізації лотка для промивання.

- Багаторазове використання
- У комплекті: 2 багаторазові фільтри

7. Інші хірургічні інструменти

Імплантовод EV (Implant Driver EV)

Нержавіюча сталь³, РЕЕК⁶, нестерильно

Короткі

- Для захвату та встановлення імплантатів.
- Кольорове маркування.
- Марковані за індикацією глибини та розміром з'єднання.
- Точки для полегшення правильного позиціонування.

Використовуються з кутовим наконечником або з рукояткою для динамометричного ключа EV хірургічного (Torque Wrench EV Surgical Driver Handle.)



Загальна довжина, мм	22.9	23.0	23.1
Артикул	68015188	68015190	68015192


Довгі

Загальна довжина, мм	32.3	33.0	33.2	33.3
Артикул	68015187	68015189	68015191	68015193

Індикатор напрямку PrimeTaper (PrimeTaper Direction Indicator)

Титанова сплав², нестерильно.

- Використовується після свердла ① та свердла ②

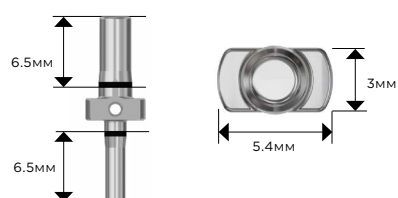

Індикатор напрямку PrimeTaper (PrimeTaper Direction Indicator)

Артикул	68015352
---------	----------

Подовжувач інструменту (Instrument Extender)

Нержавіюча сталь³, нестерильно

- Призначений для збільшення довжини свердла або імплантоводу EV.

Глибиномір імплантату (Implant Depth Gauge) PrimeTaper/ Astra Tech Implant EV

Титановий сплав², нестерильно

- Один кінець відповідає довжині імплантатів.
- Інший кінець є вимірювальним зонтом з маркуванням від 0 до 15 мм.

Подовжувач інструменту (Instrument Extender)

Артикул	68015197	68015198
---------	----------	----------

Глибиномір імплантату (Implant Depth Gauge) PrimeTaper/ Astra Tech Implant EV

Динамометричний ключ EV (Torque Wrench EV)



Артикул	25774	25775
---------	-------	-------

Рукоятка для динамометричного ключа EV хірургічна (Torque Wrench EV Surgical Driver Handle)



Динамометричний ключ EV (Torque Wrench EV)

Нержавіюча сталь³, нестерильно

- Використовується разом з хірургічною рукояткою

Рукоятка для динамометричного ключа EV хірургічна (Torque Wrench EV Surgical Driver Handle)

Нержавіюча сталь³, нестерильно

- Використовується разом з динамометричним ключем

Шестигранна викрутка (Hex Driver)



Загальна довжина, мм	20	24	35
Артикул	68015207	68015205	68015206

Шестигранна викрутка (Hex Driver)

Нержавіюча сталь³, нестерильно

- Використовується разом з кутовим наконечником або з хірургічною рукояткою

Шестигранна викрутка ручна (Hex Driver Manual)



Загальна довжина, мм	20	31
Артикул	25771	25772

Шестигранна викрутка ручна (Hex Driver Manual)

Нержавіюча сталь³, нестерильно

Мукотом (Mucosal Punch)




Ø мм	3.5	4	4.5	5	5.5	6.5
Артикул	25711	25712	25713	25714	25715	25731

Мукотом (Mucosal Punch)

Нержавіюча сталь³, пластик ABS⁹, стерильне, одноразове використання

Кількість 5

Радіографічний шаблон PrimeTaper (PrimeTaper Radiographic Template)

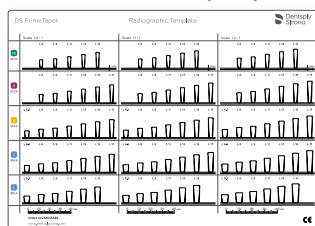

Артикул	68015322
---------	----------

Радіографічний шаблон PrimeTaper (PrimeTaper Radiographic Template)

Пластик РС⁹, нестерильно

- Інструмент для планування перед хірургією.
- Використовується разом з рентгенівським знімком щелепи пацієнта.
- Діапазон збільшення від 1.0 до 1.5, представлено на двох окремих аркушах.

8. Інструменти - навігаційна хірургія

Для навігаційної хірургії з імплантатами PrimeTaper EV доступні спеціальні інструменти. Вони використовуються лише разом з шаблонами Simplant SAFE Guide та CEREC Guide 3. Коли йдеться про глибину або довжину 6 мм, це відповідає PrimeTaper GS 6.5 мм. При використанні програмного забезпечення Simplant або планування лікування в Simplant, інструменти для навігаційної хірургії для специфічних випадків, можуть бути замовлені разом з шаблоном Simplant SAFE Guide.

Мукотом

Мукотом GS (Mucosal Punch GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Використовується для кругового розрізу під діаметр імпланту в слизовій оболонці до рівня корональної частини кістки, де має бути розташований плечовий край імпланту.

- Одноразовий
- Марковані за діаметром
- Маркування глибини відповідно до довжини імплантату

Мукотом GS (Mucosal Punch GS)



Ø мм	3.0 XND	3.6 ND	4.2 ND	4.8 WD
Артикул	68017269	68017270	68017271	68017272

Свердла

Початкове свердло GS (Initial Drill GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Використовується для видалення слизової оболонки та створення початкової точки для наступних свердлінь GS.

- Для багаторазового використання
- Марковані за діаметром
- Маркування глибини відповідно до довжини імплантату

Початкове свердло GS (Initial Drill GS)



Ø мм	3.0 XND	3.6 ND	4.2 ND	4.8 WD
Артикул	68017273	68017274	68017275	68017276

Свердло 1 PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill 1 GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Перше свердло для підготовки остеотомії до запланованої довжини імплантату.

- Свердло: багаторазове використання
- Втулка: одноразове використання
- Механічний обмежувач глибини
- Навігація з Sleeve-on-Drill системою
- Свердла марковані за довжиною та діаметром

Свердло 1 PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill 1 GS)




Ø мм	1.9	1.9	1.9
Довжина імплантату, мм	6.5-8	9-11	13-15
Артикул	68017287	68017288	68017289

Свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill GS)



Ø мм	2.35	2.35	2.35	2.95	2.95	2.95
Довжина імплантату, мм	6.5-8	9-11	13-15	6.5-8	9-11	13-15
Артикул	68017229	68017230	68017231	68017232	68017233	68017234

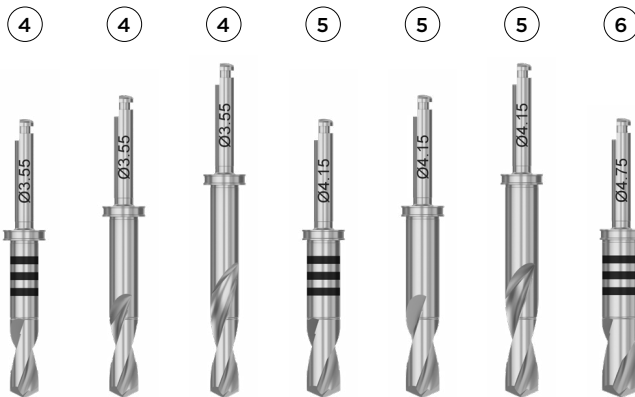

Ø мм	3.55	3.55	3.55	4.15	4.15	4.15	4.75
Довжина імплантату, мм	6.5-8	9-11	13-15	6.5-8	9-11	13-15	6.5-8
Артикул	68017235	68017236	68017237	68017238	68017239	68017240	68017241


Свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill GS)

Нержавіюча сталь ³, стерильно

Використовується для послідовної підготовки ложа для імплантата відповідно до запланованої довжини та діаметра імпланту.

- Для багаторазового використання
- Механічний обмежувач глибини
- Навігація з Sleeve-on-Drill системою
- Марковані за відповідною довжиною та діаметром

Втулки для свердл потрібно замовляти окремо.

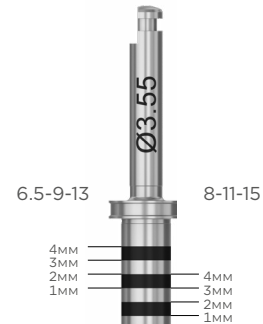

Маркування глибини для кортикального свердління в залежності від довжини імплантату

Свердло PrimeTaper GS з втулкою може використовуватись для кортикальної підготовки. Для імплантів довжиною 6.5-8 мм використовуються свердла 4, 5 та 6, які мають відповідні маркування глибини. Глибину свердління слід контролювати візуально, якщо не використовується обмежувач глибини.

Кортикальні свердла

Кортикальне свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Cortical Drill GS)

Нержавіюча сталь ³, стерильно

Свердла використовуються для підготовки кортикальної кістки на глибину 2 мм

- Для багаторазового використання
- Механічний обмежувач глибини
- Марковані за відповідною довжиною та діаметром

Кортикальне свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Cortical Drill GS)



Ø мм	2.95	2.95	3.55	3.55	4.15	4.15	4.75	4.75
Довжина імплантату, мм	9-13	8-11-15	9-13	8-11-15	6.5-9-13	8-11-15	6.5-9-13	8-11-15
Артикул	68017297	68017298	68017299	68017300	68017301	68017302	68017303	68017304

Проміжні свердла

Свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Для точного коригування діаметра остеотомії.

- Для багаторазового використання
- Механічний об'єднувач глибини
- Навігація з Sleeve-on-Drill системою
- Марковані за відповідною довжиною та діаметром

Свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill GS)

	2½	2½	2½	3½	3½	3½
						
Ø мм	2.65	2.65	2.65	3.25	3.25	3.25
Довжина імплантату, мм	6.5-8	9-11	13-15	6.5-8	9-11	13-15
Артикул	68017242	68017243	68017244	68017245	68017246	68017247

	4½	4½	4½	5½	5½	5½
						
Ø мм	3.85	3.85	3.85	4.45	4.45	4.45
Довжина імплантату, мм	6.5-8	9-11	13-15	6.5-8	9-11	13-15
Артикул	68017248	68017249	68017250	68017251	68017252	68017253


Мітчики

Мітчик PrimeTaper GS (PrimeTaper Tap GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Для препарування дуже щільної кістки.

- Багаторазового використання
- Маркування за діаметром
- Маркування за глибиною

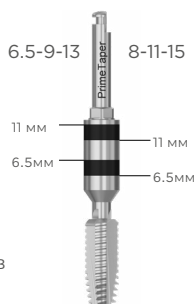

Маркування мітчиків за глибиною в залежності від довжини імплантату.

Мітчик PrimeTaper GS (PrimeTaper Tap GS)

				
Ø мм	Ø3.0 XND	3.6 ND	4.2 ND	4.8 WD
Артикул	68017277	68017226	68017227	68017228

Втулка на свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill Sleeve GS)

					
No.	1	1	1	2	2
Ø	XND	ND	WD	XND	ND
Артикул	68017292	68017290	68017291	68017293	68017254

								
No.	3	3	3	4	4	5	5	6
Ø	XND	ND	WD	ND	WD	ND	WD	WD
Артикул	68017294	68017255	68017256	68017257	68017258	68017259	68017260	68017261

						
No.	2½	2½	3½	4½	4½	5½
Ø	XND	ND	ND	ND	WD	WD
Артикул	68017295	68017262	68017263	68017264	68017265	68017266

Імплантовод GS (Implant Driver EV GS)

				
	XS	S	M	L
З'єднання	XND	ND	ND	WD
Артикул	68017286	68017001	68017002	68017003

Втулки

Втулка PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill Sleeve GS)

Нержавіюча сталь ³, стерильно

Для безпечної навігації свердл у хірургічному протоколі.

- Одноразове використання
- Навігація з Sleeve-on-Drill системою
- Марковані XND (Extra Narrow Diameter, екстра вузький діаметр) при використанні зі свердлами для імплантату 3.0, ND (Narrow Diameter, вузький діаметр) при використанні зі свердлами для імплантатів Ø3.6 мм та Ø4.2 мм або WD (Wide Diameter, широкий діаметр) для імплантату Ø4.8 мм.
- Марковані за діаметром та номером, що відповідають свердлам, для яких вони використовуються.

Втулки на свердла
замовляються окремо




Імплантовод

Імплантовод GS (Implant Driver EV GS)

Нержавіюча сталь ³, нестерильно

Для встановлення імпланту в підготовлене ложе для імплантації.

- Дві борозни на валу вказують відповідну довжину імплантата: 8-11-15 мм і 6-9-13 мм
- Багаторазове використання
- Кольорове кодування

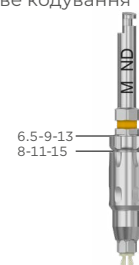

Стабілізаційні абатменти

Стабілізаційний абатмент EV (Stabilization Abutment EV)

Титановий сплав², нестерильно

Використовується для стабілізації хірургічного шаблону для подальшої обробки імплантату.

- Для багаторазового використання
- Марковані за діаметром та довжиною імплантату 6/6.5-9-13 мм або 8-11-15 мм
- Кольорове маркування

Стабілізаційний абатмент EV (Stabilization Abutment EV)

								
	XS	XS	S	S	M	M	L	L
З'єднання								
Довжина імплантату, мм	9-13	8-11-15	6-9-13	8-11-15	6/6.5-9-13	8-11-15	6/6.5-9-13	8-11-15
Артикул	68017278	68017279	68017280	68017281	68017282	68017283	68017284	68017285

Система фіксації

Свердло для фіксуючого гвинта GS (Guide Fixation Drill GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Для підготовки кістки для встановлення фіксувального гвинта.

- Багаторазове використання

Фіксувальний гвинт GS (Guide Fixation screw GS)

Нержавіюча сталь³, стерильно

Закріплює шаблон безпосередньо на кістці для забезпечення його нерухомості.

- Одноразове використання

Свердло для фіксуючого гвинта GS (Guide Fixation Drill GS)



Фіксувальний гвинт GS (Guide Fixation screw GS)



	14 мм	Ø2.0
Артикул	68017155	68017076

Лоток для навігаційної хірургії

Лоток PrimeTaper GS для навігаційної хірургії (PrimeTaper Surgical Tray GS)

PPSU⁷, силіконові⁸ тримачі, нестерильні.

Набір GS використовується під час хірургічного втручання та для зберігання хірургічних інструментів під PrimeTaper.

- Два лотки для інструментів
- Без гумових ущільнювачів для зручнішого очищення.
- Кольори та іконки, що підтримують послідовність хірургічної процедури.
- QR-код для додаткової інформації.
- Без інструментів

Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів для замовлення навігаційного хірургічного набору PrimeTaper GS (лоток та необхідні інструменти).

Лоток PrimeTaper GS для навігаційної хірургії



Розмір, мм	Довжина 138,6	Ширина 185,1	Висота 61,5
Артикул	68017306		

Лоток PrimeTaper GS для навігаційної хірургії, малий (PrimeTaper Surgical Tray GS small)



Розмір ,мм	Довжина 97,8	Ширина 136,5	Висота 61,5
Артикул	68017307		

Лоток PrimeTaper GS для навігаційної хірургії, малий (PrimeTaper Surgical Tray GS small)

PPSU⁷, силіконові⁸ тримачі, нестерильно

Використовується під час хірургічної процедури та для зберігання хірургічних інструментів PrimeTaper.

- Два лотки для інструментів
- Без гумових ущільнювачів для зручнішого очищення.
- Кольори та іконки, що підтримують послідовність хірургічної процедури.
- QR-код для додаткової інформації.
- Без інструментів.

Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів для замовлення малого навігаційного хірургічного набору GS (лоток та необхідні інструменти).

Огляд набору PrimeTaper GS для навігаційної хірургії (PrimeTaper Surgical Tray GS)

Верхній лоток

Свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Drill GS)

1 Ø1.9 6.5-8мм	Артикул 68017287	3 Ø2.95 6.5-8мм	Артикул 68017232	5 Ø4.15 6.5-8мм	Артикул 68017238
1 Ø1.9 9-11мм	Артикул 68017288	3 Ø2.95 9-11мм	Артикул 68017233	5 Ø4.15 9-11мм	Артикул 68017239
1 Ø1.9 13-15мм	Артикул 68017289	3 Ø2.95 13-15мм	Артикул 68017234	5 Ø4.15 13-15мм	Артикул 68017240
2 Ø2.35 6.5-8мм	Артикул 68017229	4 Ø3.55 6.5-8мм	Артикул 68017235		
2 Ø2.35 9-11мм	Артикул 68017230	4 Ø3.55 9-11мм	Артикул 68017236		
2 Ø2.35 13-15мм	Артикул 68017231	4 Ø3.55 13-15мм	Артикул 68017237		


Мукотом GS (Mucosal Punch GS)

Ø3.0 XND	Артикул 68017269
Ø3.6 ND	Артикул 68017270
Ø4.2 ND	Артикул 68017271
Ø4.8 WD	Артикул 68017272

Initial Drill GS

Ø3.0 XND	Артикул 68017273
Ø3.6 ND	Артикул 68017274
Ø4.2 ND	Артикул 68017275
Ø4.8 WD	Артикул 68017276

Шестигранна
викрутка ручна
(Hex Driver Manual)
Артикул 25772

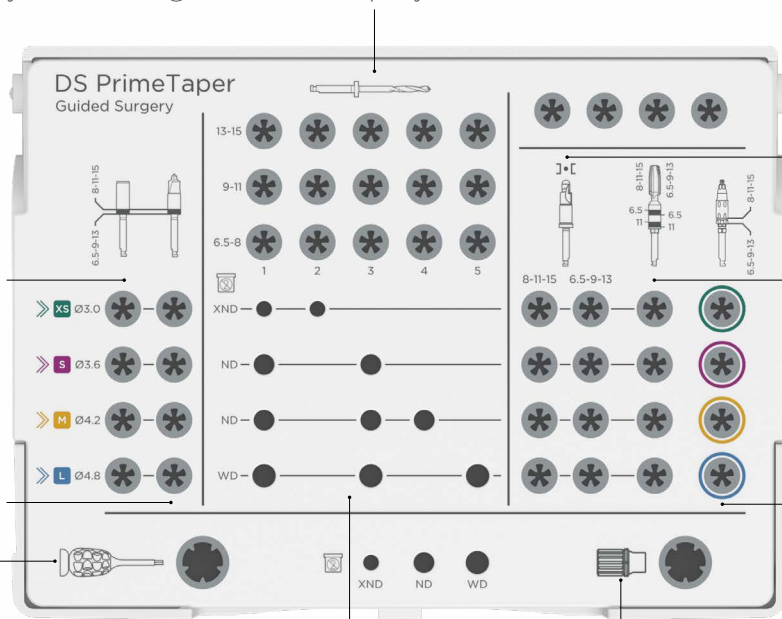

Кортикальне свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Cortical Drill GS)

Ø2.95 9-13мм	Артикул 68017297
Ø2.95 8-11-15мм	Артикул 68017298
Ø3.55 9-13мм	Артикул 68017299
Ø3.55 8-11-15мм	Артикул 68017300
Ø4.15 9-13мм	Артикул 68017301
Ø4.15 8-11-15мм	Артикул 68017302
Ø4.75 9-13мм	Артикул 68017303
Ø4.75 8-11-15мм	Артикул 68017304

Мітчик PrimeTaper GS (PrimeTaper Tap GS)

Ø3.0 XND	Артикул 68017277
Ø3.6 ND	Артикул 68017226
Ø4.2 ND	Артикул 68017227
Ø4.8 WD	Артикул 68017228

Імплантовод GS (Implant Driver GS)

(XS) XND	Артикул 68017286
(S) ND	Артикул 68017001
(M) ND	Артикул 68017002
(L) WD	Артикул 68017003

Втулка PrimeTaper GS (PrimeTaper Sleeve GS)


68017292 PrimeTaper Sleeve 1 Ø XND GS	68017257 PrimeTaper Sleeve 4 Ø ND GS
68017290 PrimeTaper Sleeve 1 Ø ND GS	68017258 PrimeTaper Sleeve 4 Ø WD GS
68017291 PrimeTaper Sleeve 1 Ø WD GS	68017259 PrimeTaper Sleeve 5 Ø ND GS
68017293 PrimeTaper Sleeve 2 Ø XND GS	68017260 PrimeTaper Sleeve 5 Ø WD GS
68017254 PrimeTaper Sleeve 2 Ø ND GS	
68017294 PrimeTaper Sleeve 3 Ø XND GS	
68017255 PrimeTaper Sleeve 3 Ø ND GS	
68017256 PrimeTaper Sleeve 3 Ø WD GS	

Рукоятка для
динамометричного ключа
EV хірургічна (
Torque Wrench EV Surgical
Driver Handle)
Артикул 25775

Нижній лоток

Динамометричний
ключ EV (Torque
Wrench EV)
Артикул 25774

Рукоятка для
динамометричного
ключа EV хірургічна
(Torque Wrench EV
Surgical Driver
Handle)
Артикул 25775

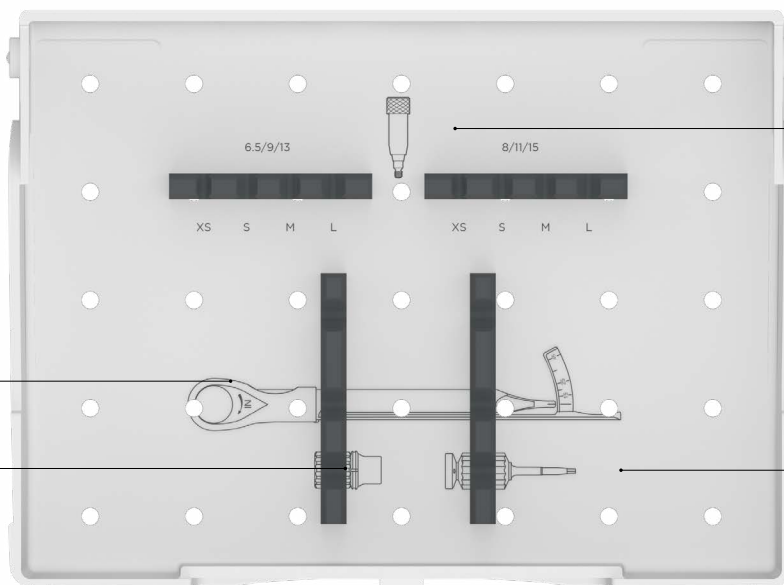

Стабілізаційний абатмент EV (Stabilization Abutment EV)

Ø3.0 9-13мм	Артикул 68017278
Ø3.0 8-11-15мм	Артикул 68017279
Ø3.6 6-9-13мм	Артикул 68017280
Ø3.6 8-11-15мм	Артикул 68017281
Ø4.2 6/6.5-9-13мм	Артикул 68017282
Ø4.2 8-11-15мм	Артикул 68017283
Ø4.8 6/6.5-9-13мм	Артикул 68017284
Ø4.8 8-11-15мм	Артикул 68017285


Шестигранна викрутка
(Hex Driver)
Артикул 25772

Overview PrimeTaper Surgical Tray GS Small

Верхній лоток

Проміжне свердло PrimeTaper GS (PrimeTaper Intermediate Drill GS)

2½	Ø2.65	6.5-8мм	Артикул 68017242	4½	Ø3.85	6.5-8мм	Артикул 68017248
2½	Ø2.65	9-11мм	Артикул 68017243	4½	Ø3.85	9-11мм	Артикул 68017249
2½	Ø2.65	13-15 мм	Артикул 68017244	4½	Ø3.85	13-15мм	Артикул 68017250
5½	Ø3.25	6.5-8мм	Артикул 68017245	5½	Ø4.45	6.5-8мм	Артикул 68017251
5½	Ø3.25	9-11мм	Артикул 68017246	5½	Ø4.45	9-11мм	Артикул 68017252
5½	Ø3.25	13-15мм	Артикул 68017247	5½	Ø4.45	13-15мм	Артикул 68017253

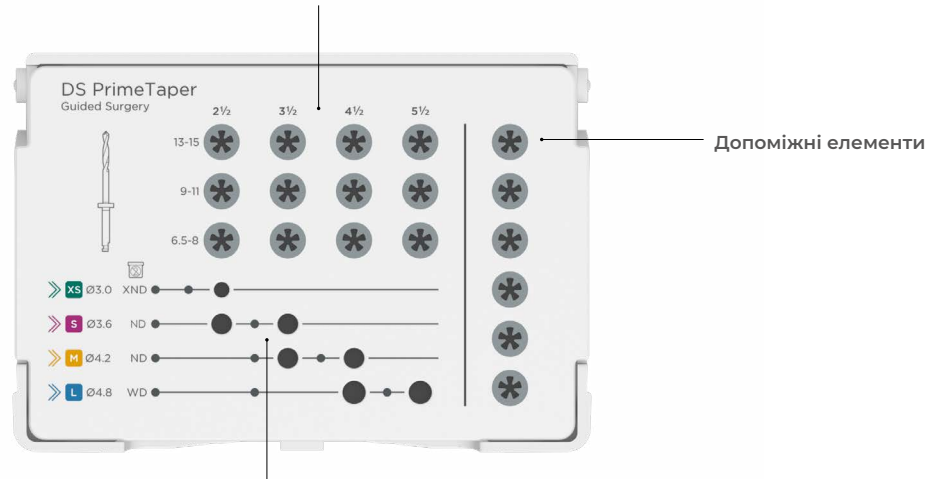


Втулка PrimeTaper GS (PrimeTaper Sleeve GS)

68017295 PrimeTaper Sleeve 2½ Ø XND GS
 68017262 PrimeTaper Sleeve 2½ Ø ND GS
 68017263 PrimeTaper Sleeve 3½ Ø ND GS
 68017264 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø ND GS
 68017265 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø WD GS
 68017266 PrimeTaper Sleeve 5½ Ø WD GS

Нижній лоток

Стабілізаційний абатмент EV (Stabilization Abutment EV)

Ø3.0	9-13мм	Артикул 68017278
Ø3.0	8-11-15мм	Артикул 68017279
Ø3.6	6-9-13мм	Артикул 68017280
Ø3.6	8-11-15мм	Артикул 68017281
Ø4.2	6.5-9-13мм	Артикул 68017282
Ø4.2	8-11-15мм	Артикул 68017283
Ø4.8	6.5-9-13мм	Артикул 68017284
Ø4.8	8-11-15мм	Артикул 68017285

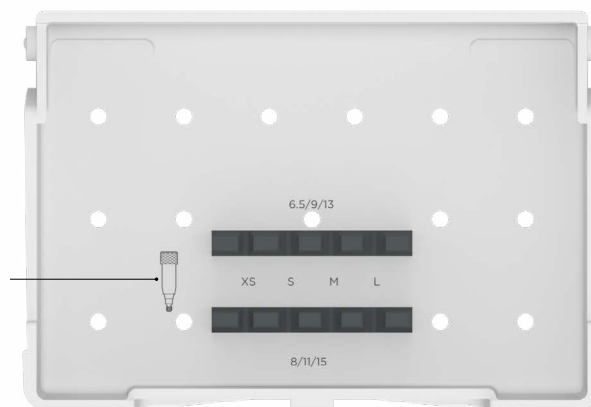


Лоток для промивання
PrimeTaper GS
(PrimeTaper Washtray GS)

Нержавіюча сталь³, PEEK⁶, силікон⁵, алюмінієвий сплав⁵, нестерильно

Використовується під час хірургічних операцій, а також для зберігання, машинного очищення, дезінфекції та подальшої парової стерилізації хірургічних інструментів PrimeTaper.

- Фіксація інструментів під час вертикального розміщення в дезінфекційній машині.
- Кольори та іконки, що підтримують хірургічну процедуру.
- В комплект входять: лоток PrimeTaper Washtray GS та знімна накладка PrimeTaper Washtray GS Overlay.

Лоток для промивання PrimeTaper GS (PrimeTaper Washtray GS)

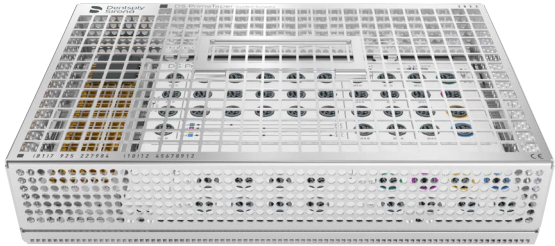

Ромір, мм	Довжина 276	Ширина 176	Висота 59
Артикул	68017267		

Додаткові елементи	Артикул
Тримач для стрижня стандарту ISO, (PEEK) з металевою пружиною (Instrument Holder for ISO shank, PEEK-plastic with metal spring) (5 шт.)	3107 1004
Тримач інструментів середній (Instrument Holder medium) (5шт.)	3107 1005
Тримач насадки для ключа-тріскачки, силікон (Instrument Holder for Ratchet Insert) (5 шт.)	3107 1006

Накладка для лотку для промивання PrimeTaper GS
(PrimeTaper Washtray GS Overlay)


Алюмінієвий сплав⁵, нестерильно

PrimeTaper Washtray GS Overlay використовується як запасна частина для PrimeTaper Washtray GS.

- Кольори та іконки, що підтримують послідовність хірургічної процедури.

Знімну накладку слід забрати з лотка для промивання перед очищенням і поставити назад перед стерилізацією. Для додаткової інформації, будь ласка, зверніться до інструкції з очищення та стерилізації.

Накладка для лотку для промивання PrimeTaper GS
(PrimeTaper Washtray GS Overlay)

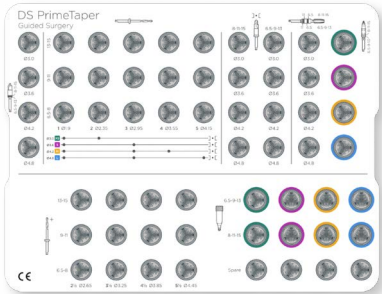

Артикул	68017296
---------	----------

9. Специфікації матеріалу

Індекс^x буде вказаний у описі матеріалу для конкретних продуктів.

Метали

Тип	Індекс	Склад / Позначення	Стандарт
Титан	1	Титан – клас 4	ASTM F67
Титановий сплав	2	Ti6Al4V	ASTM F136
Нержавіюча сталь	3	Хірургічна нержавіюча сталь	ASTM F899
Покриття TiN (титановий нітрид).	4	Титановий нітрид	
Алюмінієвий сплав	5	AlMg1	

Plastics

Тип	Індекс	Склад / Позначення	Стандарт
PEEK	6	Поліетеркетон	
PPSU	7	Поліфенілсульфон	
Силікон	8	Полісилоксан	
ABS	9	Акрилонітрил-бутадиєн-стирол	
PC	10	Полікарбонат	
PTFE	11	Політетрафторетилен	

10. Показчик

За артикулом

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
25711	Mucosal Punch Ø3.5.....15	68013005	HealDesign EV (S) Ø4 2.5mm7
25712	Mucosal Punch Ø4.0.....15	68013006	HealDesign EV (S) Ø4 3.5mm7
25713	Mucosal Punch Ø4.5.....15	68013007	HealDesign EV (S) Ø4 4.5mm7
25714	Mucosal Punch Ø5.0.....15	68013008	HealDesign EV (S) Ø4 6.5mm7
25715	Mucosal Punch Ø5.5.....15	68013009	HealDesign EV (S) Ø5 2.5mm7
25731	Mucosal Punch Ø6.5.....15	68013010	HealDesign EV (S) Ø5 3.5mm7
25771	Hex Driver 20mm manual.....15	68013011	HealDesign EV (S) Ø5 4.5mm7
25772	Hex Driver 31mm manual.....15	68013012	HealDesign EV (S) Ø5 6.5mm7
25774	Torque Wrench EV.....15	68013013	HealDesign EV (S) Ø6 3.5mm7
25775	Torque Wrench EV Surgical Driver Handle15	68013014	HealDesign EV (S) Ø6 4.5mm7
26206	Bone Reamer EV Ø 4.0.....12	68013015	HealDesign EV (M) Ø5 2.5mm7
26207	Bone Reamer EV Ø 4.6.....12	68013016	HealDesign EV (M) Ø5 3.5mm7
26208	Bone Reamer EV Ø 5.2.....12	68013017	HealDesign EV (M) Ø5 4.5mm7
26209	Bone Reamer EV Ø 5.8.....12	68013018	HealDesign EV (M) Ø5 6.5mm7
26210	Bone Reamer EV Ø 6.4.....12	68013019	HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm7
26211	Bone Reamer EV Ø 7.0.....12	68013020	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm7
26212	Bone Reamer Guide EV 3.0.....12	68013021	HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm7
26213	Bone Reamer Guide EV 3.6.....12	68013022	HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm7
26214	Bone Reamer Guide EV 4.2.....12	68013023	HealDesign EV (L) Ø5 2.5mm.....7
26215	Bone Reamer Guide EV 4.8.....12	68013024	HealDesign EV (L) Ø5 3.5mm.....7
26216	Bone Reamer Guide EV 5.4.....12	68013025	HealDesign EV (L) Ø5 4.5mm.....7
3107 1004	Instrument Holder for ISO shank.....13, 24	68013026	HealDesign EV (L) Ø5 6.5mm.....7
3107 1005	Instrument Holder medium.....13, 24	68013027	HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm.....7
3107 1006	Instrument Holder for Ratchet Insert13, 24	68013028	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm.....7
68010001	Cover Screw EV (XS).....6	68013029	HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm.....7
68010002	Cover Screw EV (S).....6	68013030	HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm.....7
68010005	Cover Screw EV (M).....6	68013031	HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm.....7
68010006	Cover Screw EV (L).....6	68013032	HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm.....7
68011085	PrimeTaper EV Ø3.0 x 8mm5	68013039	HealDesign EV (S) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68011086	PrimeTaper EV Ø3.0 x 9mm5	68013040	HealDesign EV (M) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68011087	PrimeTaper EV Ø3.0 x 11mm.....5	68013041	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Triangular.....7
68011088	PrimeTaper EV Ø3.0 x 13mm.....5	68013042	HealDesign EV (L) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68011089	PrimeTaper EV Ø3.0 x 15mm.....5	68013043	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Triangular.....7
68011090	PrimeTaper EV Ø3.6 x 8mm5	68013044	Healing Abutment EV (XS) 2mm.....6
68011091	PrimeTaper EV Ø3.6 x 9mm5	68013045	Healing Abutment EV (XS) 3mm.....6
68011092	PrimeTaper EV Ø3.6 x 11mm.....5	68013046	Healing Abutment EV (XS) 4mm.....6
68011093	PrimeTaper EV Ø3.6 x 13mm.....5	68013047	Healing Abutment EV (XS) 6mm.....6
68011094	PrimeTaper EV Ø3.6 x 15mm.....5	68013048	Healing Abutment EV (S) 2mm.....6
68011095	PrimeTaper EV Ø3.6 x 17mm.....5	68013049	Healing Abutment EV (S) 3mm.....6
68011096	PrimeTaper EV Ø4.2 x 6.5mm5	68013050	Healing Abutment EV (S) 4mm.....6
68011097	PrimeTaper EV Ø4.2 x 8mm5	68013051	Healing Abutment EV (S) 6mm.....6
68011098	PrimeTaper EV Ø4.2 x 9mm5	68013052	Healing Abutment EV (M) 2mm.....6
68011099	PrimeTaper EV Ø4.2 x 11mm.....5	68013053	Healing Abutment EV (M) 3mm.....6
68011100	PrimeTaper EV Ø4.2 x 13mm.....5	68013054	Healing Abutment EV (M) 4mm.....6
68011101	PrimeTaper EV Ø4.2 x 15mm.....5	68013055	Healing Abutment EV (M) 6mm.....6
68011102	PrimeTaper EV Ø4.2 x 17mm.....5	68013056	Healing Abutment EV (L) 2mm.....6
68011103	PrimeTaper EV Ø4.8 x 6.5mm5	68013057	Healing Abutment EV (L) 3mm.....6
68011104	PrimeTaper EV Ø4.8 x 8mm5	68013058	Healing Abutment EV (L) 4mm.....6
68011105	PrimeTaper EV Ø4.8 x 9mm5	68013059	Healing Abutment EV (L) 6mm.....6
68011106	PrimeTaper EV Ø4.8 x 11mm.....5	68015133	Свердло направляющее (Guide Drill).....8
68011107	PrimeTaper EV Ø4.8 x 13mm.....5	68015134	Свердло коп'євидне (Precision Drill).....8
68011108	PrimeTaper EV Ø4.8 x 15mm.....5	68015187	Implant Driver EV (XS) long.....14
68011109	PrimeTaper EV Ø4.8 x 17mm.....5	68015188	Implant Driver EV (S) короткий.....14
68011110	PrimeTaper EV Ø5.4 x 6.5mm.....5	68015189	Implant Driver EV (S) long.....14
68011111	PrimeTaper EV Ø5.4 x 8mm5	68015190	Implant Driver EV (M) короткий14
68011112	PrimeTaper EV Ø5.4 x 9mm5	68015191	Implant Driver EV (M) long.....14
68011113	PrimeTaper EV Ø5.4 x 11mm.....5	68015192	Implant Driver EV (L) короткий.....14
68011114	PrimeTaper EV Ø5.4 x 13mm.....5	68015193	Implant Driver EV (L) long.....14
68011115	PrimeTaper EV Ø5.4 x 15mm.....5	68015197	Instrument Extender.....14
68013001	HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm7	68015198	PrimeTaper/Astra Tech Implant Depth Gauge.....14
68013002	HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm7	68015205	Hex Driver 24мм15
68013003	HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm7	68015206	Hex Driver 35мм15
68013004	HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm7	68015207	Hex Driver 20мм15

Артикул	Сторінка
68015235 SmartFix Guide.....	12
68015266 Washtray Sterilization Container.....	13
68015267 Washtray Sterilization Container Filter.....	13
68015321 PrimeTaper Surgical Tray.....	10
68015322 PrimeTaper Radiographic Template.....	15
68015323 PrimeTaper Washtray.....	13
68015324 Drill 1 Ø1.9 short.....	8
68015325 PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 short.....	8
68015326 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 short.....	8
68015327 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 short.....	8
68015328 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 short.....	8
68015329 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 short.....	8
68015330 PrimeTaper Drill 7 Ø5.35 short.....	8
68015331 Drill 1 Ø1.9 long.....	8
68015332 PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 long.....	8
68015333 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 long.....	8
68015334 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 long.....	8
68015335 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 long.....	8
68015336 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 long.....	8
68015337 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 short.....	9
68015338 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 short.....	9
68015339 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 short.....	9
68015340 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 short.....	9
68015341 PrimeTaper Drill 6½ Ø5.05 short.....	9
68015342 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 long.....	9
68015343 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 long.....	9
68015344 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 long.....	9
68015345 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 long.....	9
68015346 PrimeTaper Drill 6½ Ø5.05 long.....	9
68015347 PrimeTaper Tap Ø3.0.....	9
68015348 PrimeTaper Tap Ø3.6.....	9
68015349 PrimeTaper Tap Ø4.2.....	9
68015350 PrimeTaper Tap Ø4.8.....	9
68015351 PrimeTaper Tap Ø5.4.....	9
68015352 PrimeTaper Direction Indicator.....	14
68015353 PrimeTaper Washtray Overlay.....	13
68017001 Implant Driver EV GS (S).....	19
68017002 Implant Driver EV GS (M).....	19
68017003 Implant Driver EV GS (L).....	19
68017076 Guide Fixation screw GS.....	20
68017155 Guide Fixation Drill.....	20
68017226 PrimeTaper Tap Ø3.6 ND GS.....	18
68017227 PrimeTaper Tap Ø4.2 ND GS.....	18
68017228 PrimeTaper Tap Ø4.8 WD GS.....	18
68017229 PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 6.5-8mm GS.....	17
68017230 PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 9-11mm GS.....	17
68017231 PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 13-15mm GS.....	17
68017232 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 6.5-8mm GS.....	17
68017233 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 9-11mm GS.....	17
68017234 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 13-15mm GS.....	17
68017235 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 6.5-8mm GS.....	17
68017236 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 9-11mm GS.....	17
68017237 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 13-15mm GS.....	17
68017238 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 6.5-8mm GS.....	17
68017239 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 9-11mm GS.....	17
68017240 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 13-15mm GS.....	17
68017241 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 6.5-8mm GS.....	17
68017242 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 6.5-8mm GS.....	18
68017243 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 9-11mm GS.....	18
68017244 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 13-15mm GS.....	18
68017245 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 6.5-8mm GS.....	18

Артикул	Сторінка
68017246 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 9-11mm GS.....	18
68017247 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 13-15mm GS.....	18
68017248 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 6.5-8mm GS.....	18
68017249 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 9-11mm GS.....	18
68017250 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 13-15mm GS.....	18
68017251 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 6.5-8mm GS.....	18
68017252 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 9-11mm GS.....	18
68017253 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 13-15mm GS.....	18
68017254 PrimeTaper Sleeve 2 Ø ND GS.....	19
68017255 PrimeTaper Sleeve 3 Ø ND GS.....	19
68017256 PrimeTaper Sleeve 3 Ø WD GS.....	19
68017257 PrimeTaper Sleeve 4 Ø ND GS.....	19
68017258 PrimeTaper Sleeve 4 Ø WD GS.....	19
68017259 PrimeTaper Sleeve 5 Ø ND GS.....	19
68017260 PrimeTaper Sleeve 5 Ø WD GS.....	19
68017261 PrimeTaper Sleeve 6 Ø WD GS.....	19
68017262 PrimeTaper Sleeve 2½ Ø ND GS.....	19
68017263 PrimeTaper Sleeve 3½ Ø ND GS.....	19
68017264 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø ND GS.....	19
68017265 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø WD GS.....	19
68017266 PrimeTaper Sleeve 5½ Ø WD GS.....	19
68017267 PrimeTaper Washtray GS.....	25
68017269 Mucosal Punch Ø3.0 XND GS.....	16
68017270 Mucosal Punch Ø3.6 ND GS.....	16
68017271 Mucosal Punch Ø4.2 ND GS.....	16
68017272 Mucosal Punch Ø4.8 WD GS.....	16
68017273 Initial Drill Ø3.0 XND GS.....	16
68017274 Initial Drill Ø3.6 ND GS.....	16
68017275 Initial Drill Ø4.2 ND GS.....	16
68017276 Initial Drill Ø4.8 WD GS.....	16
68017277 PrimeTaper Tap Ø3.0 XND GS.....	18
68017278 Stabilization Abutment EV (XS) 9-13 MM.....	20
68017279 Stabilization Abutment EV (XS) 8-11-15 MM.....	20
68017280 Stabilization Abutment EV (S) 6-9-13 MM.....	20
68017281 Stabilization Abutment EV (S) 8-11-15 MM.....	20
68017282 Stabilization Abutment EV (M) 6/6.5-9-13 MM.....	20
68017283 Stabilization Abutment EV (M) 8-11-15 MM.....	20
68017284 Stabilization Abutment EV (L) 6/6.5-9-13 MM.....	20
68017285 Stabilization Abutment EV (L) 8-11-15 MM.....	20
68017286 Implant Driver EV (XS) XND GS.....	19
68017287 PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 6.5-8 GS.....	16
68017288 PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 9-11 GS.....	16
68017289 PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 13-15 GS.....	16
68017290 PrimeTaper Drill Sleeve 1 Ø ND GS.....	19
68017291 PrimeTaper Drill Sleeve 1 Ø WD GS.....	19
68017292 PrimeTaper Drill Sleeve 1 Ø XND GS.....	19
68017293 PrimeTaper Drill Sleeve 2 Ø XND GS.....	19
68017294 PrimeTaper Drill Sleeve 3 Ø XND GS.....	19
68017295 PrimeTaper Drill Sleeve 2½ Ø XND GS.....	19
68017296 PrimeTaper Washtray Overlay GS.....	25
68017297 PrimeTaper Cortical Drill Ø2.95, 9-13 MM GS.....	17
68017298 PrimeTaper Cortical Drill Ø2.95, 8-11-15 MM GS.....	17
68017299 PrimeTaper Cortical Drill Ø3.55, 9-13 MM GS.....	17
68017300 PrimeTaper Cortical Drill Ø3.55, 8-11-15 MM GS.....	17
68017301 PrimeTaper Cortical Drill Ø4.15, 6.5-9-13 MM GS.....	17
68017302 PrimeTaper Cortical Drill Ø4.15, 8-11-15 MM GS.....	17
68017303 PrimeTaper Cortical Drill Ø4.75, 6.5-9-13 MM GS.....	17
68017304 PrimeTaper Cortical Drill Ø4.75, 8-11-15 MM GS.....	17
68017306 PrimeTaper Surgical Tray GS.....	20
68017307 PrimeTaper Surgical Tray GS Small.....	21

За алфавітом

Артикул	Сторінка
26206	Bone Reamer EV Ø 4.0.....12
26207	Bone Reamer EV Ø 4.6.....12
26208	Bone Reamer EV Ø 5.2.....12
26209	Bone Reamer EV Ø 5.8.....12
26210	Bone Reamer EV Ø 6.4.....12
26211	Bone Reamer EV Ø 7.0.....12
26212	Bone Reamer Guide EV 3.0.....12
26213	Bone Reamer Guide EV 3.6.....12
26214	Bone Reamer Guide EV 4.2.....12
26215	Bone Reamer Guide EV 4.8.....12
26216	Bone Reamer Guide EV 5.4.....12
68010006	Cover Screw EV (L).....6
68010005	Cover Screw EV (M).....6
68010002	Cover Screw EV (S).....6
68010001	Cover Screw EV (XS).....6
68015331	Drill 1 Ø1.9 long.....8
68015324	Drill 1 Ø1.9 short.....8
68015133	Guide Drill.....8
68017155	Guide Fixation Drill.....20
68017076	Guide Fixation screw GS.....20
68013023	HealDesign EV (L) Ø5 2.5mm.....7
68013024	HealDesign EV (L) Ø5 3.5mm.....7
68013042	HealDesign EV (L) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68013025	HealDesign EV (L) Ø5 4.5mm.....7
68013026	HealDesign EV (L) Ø5 6.5mm.....7
68013027	HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm.....7
68013028	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm.....7
68013043	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Triangular.....7
68013029	HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm.....7
68013030	HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm.....7
68013031	HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm.....7
68013032	HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm.....7
68013015	HealDesign EV (M) Ø5 2.5mm.....7
68013016	HealDesign EV (M) Ø5 3.5mm.....7
68013040	HealDesign EV (M) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68013017	HealDesign EV (M) Ø5 4.5mm.....7
68013018	HealDesign EV (M) Ø5 6.5mm.....7
68013019	HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm.....7
68013020	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm.....7
68013041	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Triangular.....7
68013021	HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm.....7
68013022	HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm.....7
68013005	HealDesign EV (S) Ø4 2.5mm.....7
68013006	HealDesign EV (S) Ø4 3.5mm.....7
68013007	HealDesign EV (S) Ø4 4.5mm.....7
68013008	HealDesign EV (S) Ø4 6.5mm.....7
68013009	HealDesign EV (S) Ø5 2.5mm.....7
68013010	HealDesign EV (S) Ø5 3.5mm.....7
68013039	HealDesign EV (S) Ø5 3.5mm Triangular.....7
68013011	HealDesign EV (S) Ø5 4.5mm.....7
68013012	HealDesign EV (S) Ø5 6.5mm.....7
68013013	HealDesign EV (S) Ø6 3.5mm.....7
68013014	HealDesign EV (S) Ø6 4.5mm.....7
68013001	HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm.....7
68013002	HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm.....7
68013003	HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm.....7
68013004	HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm.....7
68013056	Healing Abutment EV (L) 2mm.....6
68013057	Healing Abutment EV (L) 3mm.....6
68013058	Healing Abutment EV (L) 4mm.....6
68013059	Healing Abutment EV (L) 6mm.....6
68013052	Healing Abutment EV (M) 2mm.....6
68013053	Healing Abutment EV (M) 3mm.....6

Артикул	Сторінка
68013054	Healing Abutment EV (M) 4mm.....6
68013055	Healing Abutment EV (M) 6mm.....6
68013048	Healing Abutment EV (S) 2mm.....6
68013049	Healing Abutment EV (S) 3mm.....6
68013050	Healing Abutment EV (S) 4mm.....6
68013051	Healing Abutment EV (S) 6mm.....6
68013044	Healing Abutment EV (XS) 2mm.....6
68013045	Healing Abutment EV (XS) 3mm.....6
68013046	Healing Abutment EV (XS) 4mm.....6
68013047	Healing Abutment EV (XS) 6mm.....6
68015207	Hex Driver 20mm.....15
25771	Hex Driver 20mm manual.....15
68015205	Hex Driver 24mm.....15
25772	Hex Driver 31mm manual.....15
68015206	Hex Driver 35mm.....15
68015193	Implant Driver EV (L) long.....14
68015192	Implant Driver EV (L) short.....14
68015191	Implant Driver EV (M) long.....14
68015190	Implant Driver EV (M) short.....14
68015189	Implant Driver EV (S) long.....14
68015188	Implant Driver EV (S) short.....14
68015187	Implant Driver EV (XS) long.....14
68017003	Implant Driver EV GS (L).....19
68017002	Implant Driver EV GS (M).....19
68017001	Implant Driver EV GS (S).....19
68017286	Implant Driver EV GS (XS) XND.....19
68017273	Initial Drill Ø3.0 XND GS.....16
68017274	Initial Drill Ø3.6 ND GS.....16
68017275	Initial Drill Ø4.2 ND GS.....16
68017276	Initial Drill Ø4.8 WD GS.....16
68015197	Instrument Extender.....14
3107 1004	Instrument Holder for ISO shank.....13, 24
3107 1006	Instrument Holder for Ratchet Insert.....13, 24
3107 1005	Instrument Holder medium.....13, 24
68017269	Mucosal Punch Ø3.0 XND GS.....16
25711	Mucosal Punch Ø3.5.....15
68017270	Mucosal Punch Ø3.6 ND GS.....16
25712	Mucosal Punch Ø4.0.....15
68017271	Mucosal Punch Ø4.2 ND GS.....16
25713	Mucosal Punch Ø4.5.....15
68017272	Mucosal Punch Ø4.8 WD GS.....16
25714	Mucosal Punch Ø5.0.....15
25715	Mucosal Punch Ø5.5.....15
25731	Mucosal Punch Ø6.5.....15
68015134	Precision Drill.....8
68015198	PrimeTaper/Astra Tech Implant Depth Gauge.....14
68015352	PrimeTaper Direction Indicator.....14
68017287	PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 6.5-8 GS.....14
68017288	PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 9-11 GS.....14
68017289	PrimeTaper Drill 1 Ø1.9 13-15 GS.....14
68017298	PrimeTaper Cortical Drill Ø2.95, 8-11-15 mm GS.....17
68017297	PrimeTaper Cortical Drill Ø2.95, 9-13 mm GS.....17
68017300	PrimeTaper Cortical Drill Ø3.55, 8-11-15 mm GS.....17
68017299	PrimeTaper Cortical Drill Ø3.55, 9-13 mm GS.....17
68017301	PrimeTaper Cortical Drill Ø4.15, 6.5-9-13 mm GS.....17
68017302	PrimeTaper Cortical Drill Ø4.15, 8-11-15 mm GS.....17
68017303	PrimeTaper Cortical Drill Ø4.75, 6.5-9-13 mm GS.....17
68017304	PrimeTaper Cortical Drill Ø4.75, 8-11-15 mm GS.....17
68017229	PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 6.5-8mm GS.....17
68017230	PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 9-11mm GS.....17
68017231	PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 13-15mm GS.....17
68015332	PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 long.....8
68015325	PrimeTaper Drill 2 Ø2.35 short.....8

Артикул	Сторінка
68017242 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 6.5-8mm GS.....	18
68017243 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 9-11mm GS.....	18
68017244 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 13-15mm GS.....	18
68015342 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 long.....	9
68015337 PrimeTaper Drill 2½ Ø2.65 short.....	9
68017232 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 6.5-8mm GS.....	17
68017233 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 9-11mm GS.....	17
68017234 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 13-15mm GS.....	17
68015333 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 long.....	8
68015326 PrimeTaper Drill 3 Ø2.95 short.....	8
68017245 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 6.5-8mm GS.....	18
68017246 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 9-11mm GS.....	18
68017247 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 13-15mm GS.....	18
68015343 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 long.....	9
68015338 PrimeTaper Drill 3½ Ø3.25 short.....	9
68017235 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 6.5-8mm GS.....	17
68017236 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 9-11mm GS.....	17
68017237 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 13-15mm GS.....	17
68015334 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 long.....	8
68015327 PrimeTaper Drill 4 Ø3.55 short.....	8
68017248 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 6.5-8mm GS.....	18
68017249 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 9-11mm GS.....	18
68017250 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 13-15mm GS.....	18
68015344 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 long.....	9
68015339 PrimeTaper Drill 4½ Ø3.85 short.....	9
68017238 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 6.5-8mm GS.....	17
68017239 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 9-11mm GS.....	17
68017240 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 13-15mm GS.....	17
68015335 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 long.....	8
68015328 PrimeTaper Drill 5 Ø4.15 short.....	8
68017251 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 6.5-8mm GS.....	18
68017252 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 9-11mm GS.....	18
68017253 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 13-15mm GS.....	18
68015345 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 long.....	9
68015340 PrimeTaper Drill 5½ Ø4.45 short.....	9
68017241 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 6.5-8mm GS.....	17
68015336 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 long.....	8
68015329 PrimeTaper Drill 6 Ø4.75 short.....	8
68015346 PrimeTaper Drill 6½ Ø5.05 long.....	9
68015341 PrimeTaper Drill 6½ Ø5.05 short.....	9
68015330 PrimeTaper Drill 7 Ø5.35 short.....	8
68011085 PrimeTaper EV Ø3.0 x 8mm.....	5
68011086 PrimeTaper EV Ø3.0 x 9mm.....	5
68011087 PrimeTaper EV Ø3.0 x 11mm.....	5
68011088 PrimeTaper EV Ø3.0 x 13mm.....	5
68011089 PrimeTaper EV Ø3.0 x 15mm.....	5
68011090 PrimeTaper EV Ø3.6 x 8mm.....	5
68011091 PrimeTaper EV Ø3.6 x 9mm.....	5
68011092 PrimeTaper EV Ø3.6 x 11mm.....	5
68011093 PrimeTaper EV Ø3.6 x 13mm.....	5
68011094 PrimeTaper EV Ø3.6 x 15mm.....	5
68011095 PrimeTaper EV Ø3.6 x 17mm.....	5
68011096 PrimeTaper EV Ø4.2 x 6.5mm.....	5
68011097 PrimeTaper EV Ø4.2 x 8mm.....	5
68011098 PrimeTaper EV Ø4.2 x 9mm.....	5
68011099 PrimeTaper EV Ø4.2 x 11mm.....	5
68011100 PrimeTaper EV Ø4.2 x 13mm.....	5
68011101 PrimeTaper EV Ø4.2 x 15mm.....	5
68011102 PrimeTaper EV Ø4.2 x 17mm.....	5
68011103 PrimeTaper EV Ø4.8 x 6.5mm.....	5
68011104 PrimeTaper EV Ø4.8 x 8mm.....	5

Артикул	Сторінка
68011105 PrimeTaper EV Ø4.8 x 9mm.....	5
68011106 PrimeTaper EV Ø4.8 x 11mm.....	5
68011107 PrimeTaper EV Ø4.8 x 13mm.....	5
68011108 PrimeTaper EV Ø4.8 x 15mm.....	5
68011109 PrimeTaper EV Ø4.8 x 17mm.....	5
68011110 PrimeTaper EV Ø5.4 x 6.5mm.....	5
68011111 PrimeTaper EV Ø5.4 x 8mm.....	5
68011112 PrimeTaper EV Ø5.4 x 9mm.....	5
68011113 PrimeTaper EV Ø5.4 x 11mm.....	5
68011114 PrimeTaper EV Ø5.4 x 13mm.....	5
68011115 PrimeTaper EV Ø5.4 x 15mm.....	5
68015322 PrimeTaper Radiographic Template.....	15
68017290 PrimeTaper Sleeve 1 Ø ND GS.....	19
68017291 PrimeTaper Sleeve 1 Ø WD GS.....	19
68017292 PrimeTaper Sleeve 1 Ø XND GS.....	19
68017254 PrimeTaper Sleeve 2 Ø ND GS.....	19
68017293 PrimeTaper Sleeve 2 Ø XND GS.....	19
68017262 PrimeTaper Sleeve 2½ Ø ND GS.....	19
68017295 PrimeTaper Sleeve 2½ Ø XND GS.....	19
68017255 PrimeTaper Sleeve 3 Ø ND GS.....	19
68017256 PrimeTaper Sleeve 3 Ø WD GS.....	19
68017294 PrimeTaper Sleeve 3 Ø XND GS.....	19
68017263 PrimeTaper Sleeve 3½ Ø ND GS.....	19
68017257 PrimeTaper Sleeve 4 Ø ND GS.....	19
68017258 PrimeTaper Sleeve 4 Ø WD GS.....	19
68017264 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø ND GS.....	19
68017265 PrimeTaper Sleeve 4½ Ø WD GS.....	19
68017259 PrimeTaper Sleeve 5 Ø ND GS.....	19
68017260 PrimeTaper Sleeve 5 Ø WD GS.....	19
68017266 PrimeTaper Sleeve 5½ Ø WD GS.....	19
68017261 PrimeTaper Sleeve 6 Ø WD GS.....	19
68015321 PrimeTaper Surgical Tray.....	10
68017306 PrimeTaper Surgical Tray GS.....	20
68017307 PrimeTaper Surgical Tray GS Small.....	21
68015347 PrimeTaper Tap Ø3.0.....	9
68015348 PrimeTaper Tap Ø3.6.....	9
68015349 PrimeTaper Tap Ø4.2.....	9
68015350 PrimeTaper Tap Ø4.8.....	9
68015351 PrimeTaper Tap Ø5.4.....	9
68017277 PrimeTaper Tap GS Ø3.0 XND.....	18
68017226 PrimeTaper Tap GS Ø3.6 ND.....	18
68017227 PrimeTaper Tap GS Ø4.2 ND.....	18
68017228 PrimeTaper Tap GS Ø4.8 WD.....	18
68015323 PrimeTaper Washtray.....	13
68017267 PrimeTaper Washtray GS.....	25
68015353 PrimeTaper Washtray Overlay.....	13
68017296 PrimeTaper Washtray Overlay GS.....	25
68015235 SmartFix Guide.....	12
68017284 Stabilization Abutment EV (L) 6/6.5-9-13 MM.....	20
68017285 Stabilization Abutment EV (L) 8-11-15 MM.....	20
68017282 Stabilization Abutment EV (M) 6/6.5-9-13 MM.....	20
68017283 Stabilization Abutment EV (M) 8-11-15 MM.....	20
68017280 Stabilization Abutment EV (S) 6-9-13 MM.....	20
68017281 Stabilization Abutment EV (S) 8-11-15 MM.....	20
68017279 Stabilization Abutment EV (XS) 8-11-15 MM.....	20
68017278 Stabilization Abutment EV (XS) 9-13 MM.....	20
25774 Torque Wrench EV.....	15
25775 Torque Wrench EV Surgical Driver Handle.....	15
68015266 Washtray Sterilization Container.....	13
68015267 Washtray Sterilization Container Filter.....	13

Нотатки

[illegible]

Нотатки

[illegible]

